



**B&B Bubbler™**  
Water Seal CPAP Valve  
0-10 cm H<sub>2</sub>O

Contents: 1 UNIT


**LOT**

**REF** 25312



Not Made With Natural Rubber Latex

**Caution:** Federal law restricts this device to sale by or on order of a physician.

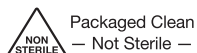

Made in China  
Protected by U.S.A  
and International Patents.  
© 2018 All Rights Reserved



**Manufactured for:**  
**B&B Medical Technologies**  
1954 Kellogg Ave. Ste 100  
Carlsbad, CA 92008 U.S.A  
Phone: +1.760.929.9972  
Fax: +1.760.929.9953  
www.bandb-medical.com


**READ AND UNDERSTAND COMPLETE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE**

**INDICATIONS:**

The B&B Bubbler is intended to provide CPAP, in a hospital environment, to spontaneously breathing neonates and infants < 10 kg who require breathing support due to conditions associated with prematurity or other conditions where CPAP is required or desired and is prescribed by a physician.

**CAUTIONS:**

The B&B Bubbler is intended to be used by qualified medical personal trained in oxygen delivery, ventilation, cardiopulmonary monitoring, and assessment of the newborn. Evaporation or condensation of water may occur during operation of this device. Frequent monitoring of the water level is required to assure consistent delivery of set pressure.

 Single patient use. Re-use on multiple patients may degrade the performance of the product and/or cause cross contamination.

**CONTRAINDICATIONS:**

Contraindicated in patients not requiring elevated lung pressure therapy.

**WARNINGS:**

CPAP therapy may have an adverse effect on the cardiopulmonary status of the patient and must be prescribed by a licensed physician.

Use of this device at gas flow rates greater than 12 LPM is not recommended and may result in the delivery of higher pressures than what is set.

Always monitor, maintain and verify the CPAP level with a manometer that measures proximal airway pressure.

**READ AND UNDERSTAND COMPLETE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.**

**AFTER PATIENT USE:** Discard the B&B Bubbler after single patient use. Do not re-use, soak, or sterilize the B&B Bubbler.

**INSTRUCTIONS:**

1. Inspect the device for damage and discard if damaged.
2. Fill the water reservoir to the solid fill line with sterile water or sterile 0.25% acetic acid solution (Refer to F and J). Add water to the bubbler through either the gas inlet adapter, located in the center of the bubbler, or by instilling water through the water level fill port, adjacent to the inlet port (Refer to H and B).
3. Slide the B&B Bubbler into a 30 mm pole or rail-mount bracket to assure that the device remains in an upright position using the equipment mount located on the rear side of the B&B Bubbler (Refer to I).

**PRIOR TO PATIENT APPLICATION:**

- While holding the CPAP Dial (Refer to C), press the Setting Lock Button (Refer to D) and rotate the CPAP dial counterclockwise to align the red arrow with the prescribed correlating CPAP level on the B&B Bubbler (Refer to G & A). Release the Setting Lock Button to lock the CPAP dial in place.
- Adjust the air/oxygen blended gas flow to the desired level between 1-12 LPM.
- Connect the expiratory end of the breathing circuit to the gas inlet connector (Refer to H) of the B&B Bubbler.
- Connect an airway pressure manometer to the circuit between the patient interface and the inspiratory side of the circuit.

- Connect a pressure relief manifold between the blended gas supply and the inlet port of a humidifier. The pressure relief manifold will limit the delivered pressure in the event of an occlusion.
- Before attaching the interface to a patient, occlude the patient interface connected to the circuit and confirm the desired pressure setting. Assure bubbling is visible and check the integrity of the breathing circuit.

**DURING PATIENT APPLICATION:**

- Continuously monitor the pressure delivered through the circuit with the use of the manometer. While holding the CPAP dial, adjust it accordingly by pressing on the Setting Lock Button and rotating the CPAP dial to deliver the physician-ordered CPAP.
- Monitor and adjust the water level to assure consistent delivery of CPAP. Monitor the water level by inspecting both the solid fill line (Refer to F) and the internal overflow chamber. To add water remove the plug on the water level fill port (Refer to B). While holding the CPAP Dial, connect a syringe to the port and add water as needed. Excess water will automatically flow into the overflow chamber. If water is in the overflow chamber, drain the water by removing the drain plug (Refer to E), located on the bottom of the B&B Bubbler. Reattach the plug when empty.
- Replace the B&B Bubbler as needed and in accordance to hospital infection control recommendations.


**SPECIFICATIONS AND OPERATION:**

The B&B Bubbler has an internal overflow chamber which limits the water level to the targeted and desired height throughout the course of therapy. External ports enable the user to drain water in the overflow chamber and add water to the system without disengaging the device, allowing the B&B Bubbler to remain a closed system.

The B&B Bubbler is a double walled vessel. The inner vessel controls the CPAP level. There is a small passage which opens to the outer vessel where the oscillations of the bubbling of water is dampened. The mean water level can be accurately read in the outer vessel without interrupting the delivery of CPAP to the patient.

**SPECIFICATIONS:**

- Connector:** ISO 5356-1:2004 compliant 15 mm x 22 mm, 360° single plane swivel connector
- Pressure:** Range 0 – 10 cm H<sub>2</sub>O
- Accuracy:** ± 1.0 cm H<sub>2</sub>O
- Gas Flow Range:** 1 to 12 LPM
- Material:** Polypropylene and ABS
- Operating Temperature:** 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
- Storage Temperature:** -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

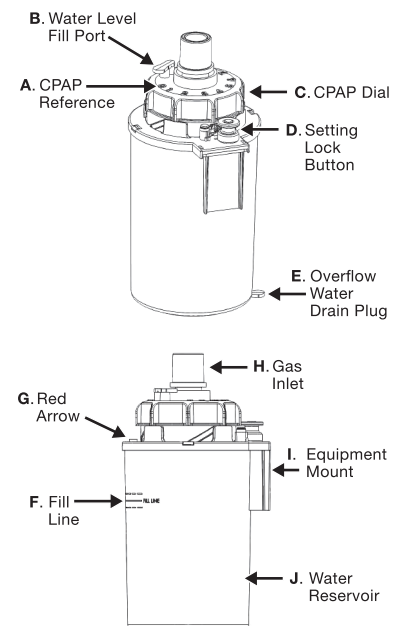



## **AVANT D'UTILISER, BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS**

1. Inspectez l'appareil pour les dommages et jeter se il est endommagé.
2. Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage solide avec de l'eau stérile ou d'une solution stérile à 0,25% d'acide acétique (référer à F et J). Ajouter de l'eau à travers le B&B Bubbler soit l'adaptateur d'entrée de gaz, situé dans le centre de le Bubbler, ou en insufflant de l'eau à travers l'orifice de remplissage du niveau d'eau, à côté de l'ouverture d'entrée (référer à H et B).
3. Faites glisser le B&B Bubbler à un poteau de 30 mm ou dans une rail-support de montage pour se assurer que le dispositif reste en position verticale en utilisant l'équipement monture située sur le côté arrière de la B&B Bubbler (référer à I).

## **AVANT PATIENT APPLICATION:**

- Tout en maintenant le cadran CPAP (référer à C), appuyez sur la touche de verrouillage Réglage (référer à D) et tourner le CPAP composer le sens antihoraire pour aligner la flèche rouge avec le niveau de CPAP de corrélation prescrite sur la B&B Bubbler (référer à G et A). Relâchez la touche de verrouillage réglage pour verrouiller la molette de CPAP en place.
- Ajuster le rapport air / oxygène mélangé à l'écoulement de gaz entre le niveau souhaité 1-12 litres par minute.
- Raccorder la fin d'expiration du circuit de respiration au connecteur d'entrée de gaz (référer à H) du B&B Bubbler.
- Connecter un manomètre de pression des voies aériennes pour le circuit entre l'interface patient et le côté du circuit inspiratoire.
- Connectez un collecteur d'allègement de la pression entre l'alimentation en gaz mélangé et l'orifice d'entrée d'un humidificateur. Le collecteur de décharge de pression limite la pression délivrée dans le cas d'occlusion.
- Avant de fixer l'interface à un patient, occlure l'interface patient relié au circuit et confirmer le réglage de la pression souhaitée. Assurer bouillonnant est visible et vérifier l'intégrité du circuit de respiration.

## **LORS DE L'APPLICATION DES PATIENTS:**

- Surveiller en continu la pression délivrée par le circuit à l'aide du manomètre. Tout en maintenant la molette de CPAP, ajuster en conséquence en appuyant sur le bouton de verrouillage de réglage et en tournant la molette CPAP pour livrer le CPAP médecin-commandé.
- Contrôler et d'ajuster le niveau d'eau pour assurer une distribution uniforme du CPAP. Surveiller le niveau d'eau en inspectant la fois la ligne de remplissage solide (Referer à F) et la chambre de trop-plein interne. Pour ajouter de l'eau enlever le bouchon sur l'orifice de remplissage de niveau d'eau (Référer à B). Tout en maintenant la molette de CPAP, connectez une seringue pour le port et ajouter de l'eau si nécessaire. L'excès d'eau se écoule automatiquement dans la chambre de débordement. Si l'eau est dans la chambre de trop-plein, vider l'eau en enlevant le bouchon de vidange (Referer à E), situé sur le bas de la B & B barboteur. Remettez le cache quand il est vide.
- Remplacez le B & B barboteur au besoin et conformément aux recommandations de contrôle des infections à l'hôpital.